





Quick Start Guide

BIG Candy Corn™ Switch

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
www.ablenetinc.com

PN 98000062 (07/17 Rev. A - FN 70500263)

Product Overview

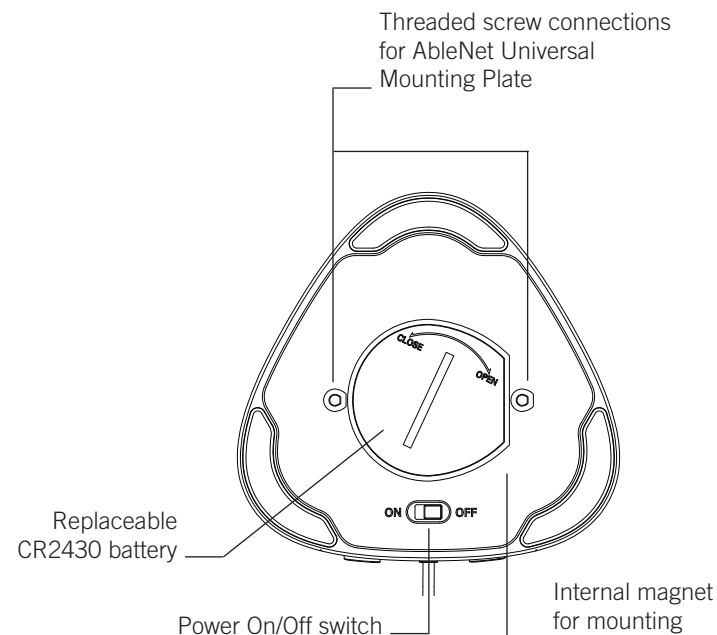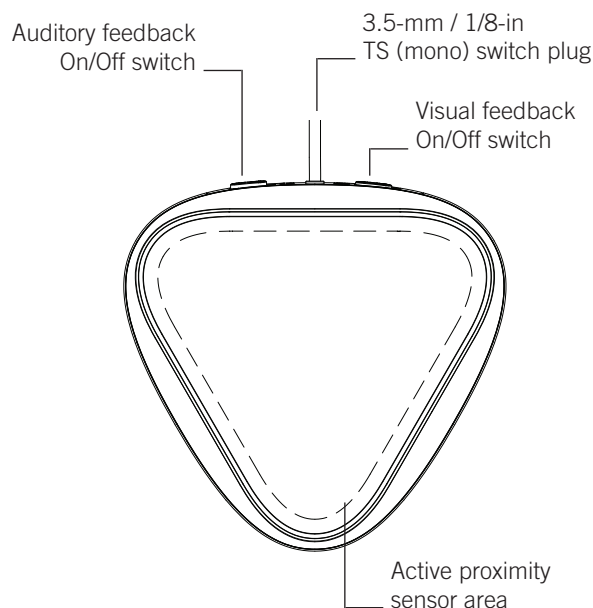

Getting Started

1. Connect BIG Candy Corn switch plug to a device with a 3.5-mm / 1/8-in TS (mono) jack
2. Turn BIG Candy Corn switch On
3. BIG Candy Corn switch will activate when a user is within 10-mm of or touching the active proximity sensor area

Optional: BIG Candy Corn switch offers the user visual feedback with three LED lights and auditory feedback with a beep when the switch is activated. Both of these features can be turned On or Off.

Switch Mounting

BIG Candy Corn switch is compatible with the AbleNet Universal Mounting Plate and AbleNet mounting arms. Attach AbleNet Universal Mounting Plate to BIG Candy Corn switch via two threaded screw connections found on the bottom of BIG Candy Corn switch.

BIG Candy Corn switch also contains an internal magnet that allows it to quickly be mounted to a magnetic surface without the AbleNet Universal Mounting Plate.

Warranty

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return / repair information is available at www.ablenetinc.com.




Guide de démarrage rapide

BIG Candy Corn™ Interrupteur

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
www.ablenetinc.com

PN 98000062 (07/17 Rév. A - FN 70500263)

Présentation du produit

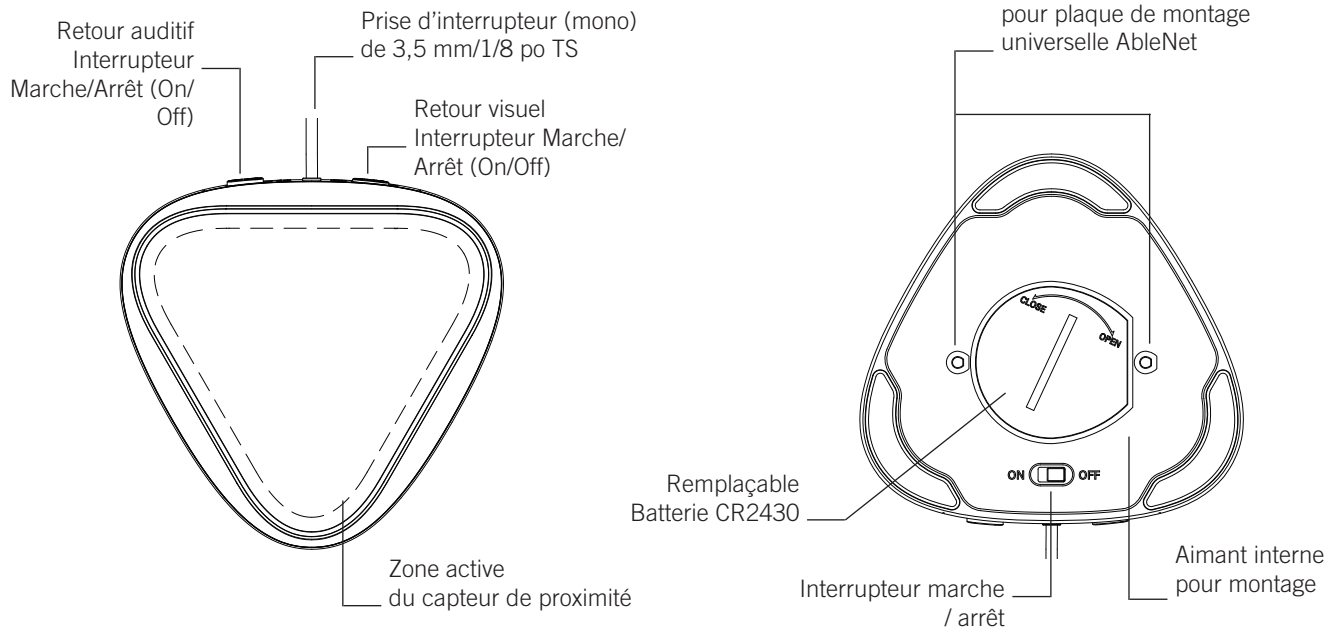

Mise en route

1. Branchez la prise de l'interrupteur BIG Candy Corn à un appareil à l'aide d'une prise jack 3,5-mm / 1/8-po TS (mono)
2. Allumez l'interrupteur BIG Candy Corn
3. L'interrupteur BIG Candy Corn s'activera si l'utilisateur se trouve ou touche dans un rayon de 10-mm la zone active du capteur de proximité

Option : L'interrupteur BIG Candy Corn permet à l'utilisateur une rétroaction visuelle à l'aide de trois voyants LED et un retour auditif équipé d'un bip lorsque l'interrupteur est activé. Ces deux caractéristiques peuvent être allumées ou éteintes.

Montage de l'interrupteur

L'interrupteur BIG Candy Corn est compatible avec la plaque de montage universelle AbleNet et les bras de montage AbleNet. Fixez la plaque de montage universelle AbleNet à l'interrupteur BIG Candy Corn à l'aide des deux raccords à vis filetées se trouvant au bas de l'interrupteur BIG Candy Corn.

L'interrupteur BIG Candy Corn contient également un aimant magnétique qui lui permet d'être rapidement monté à une surface magnétique sans plaque de montage universelle AbleNet.

Garantie

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles sur www.ablenetinc.com.




Kurzanleitung

BIG Candy Corn™ Schalter

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
www.ablenetinc.com

PN 98000062 (07/17 Rev. A - FN 70500263)

Produktübersicht

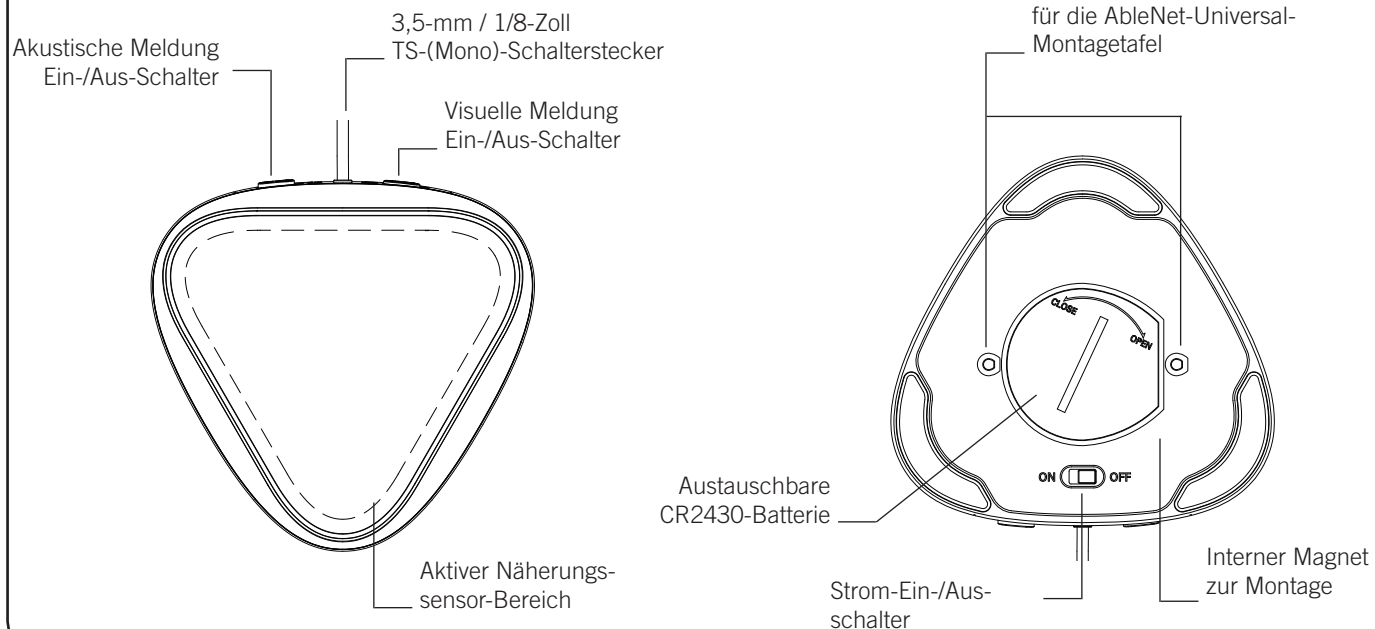

Allgemeine Beschreibung

1. Verbinden Sie den BIG Candy Corn-Schalterstecker mit einem Gerät mit 3,5-mm / 1/8-in TS-(Mono)-Buchse.
2. Drehen Sie den Schalter des BIG Candy Corn auf EIN.
3. Der BIG Candy Corn-Schalter wird aktiviert, wenn sich ein Nutzer auf 10 mm an den aktiven Näherungssensor-Bereich annähert oder diesen berührt.

Optional: Der BIG Candy Corn-Schalter bietet dem Nutzer ein visuelles Feedback mit drei LEDs und eine akustische Meldung mit Piepton, wenn der Schalter aktiviert wird. Diese beiden Funktionen können auf Ein oder Aus gestellt werden.

Schaltereinbau

Der BIG Candy Corn-Schalter ist mit der AbleNet-Universal-Montagetafel und den AbleNet-Tragarmen kompatibel. Befestigen Sie die AbleNet-Montagetafel am BIG Candy Corn-Schalter über die beiden Gewindeverschraubungen, die sich am Boden des BIG Candy Corn-Schalters befinden.

Der BIG Candy Corn-Schalter verfügt auch über einen internen Magneten, der eine schnelle Montage an einer magnetischen Oberfläche ermöglicht, ohne dass die AbleNet-Montagetafel benötigt wird.

Garantie

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.




Guía de inicio rápido

Interruptor BIG Candy Corn™

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
www.ablenetinc.com

PN 98000062 (07/17 Rev. A - FN 70500263)

Información general del producto

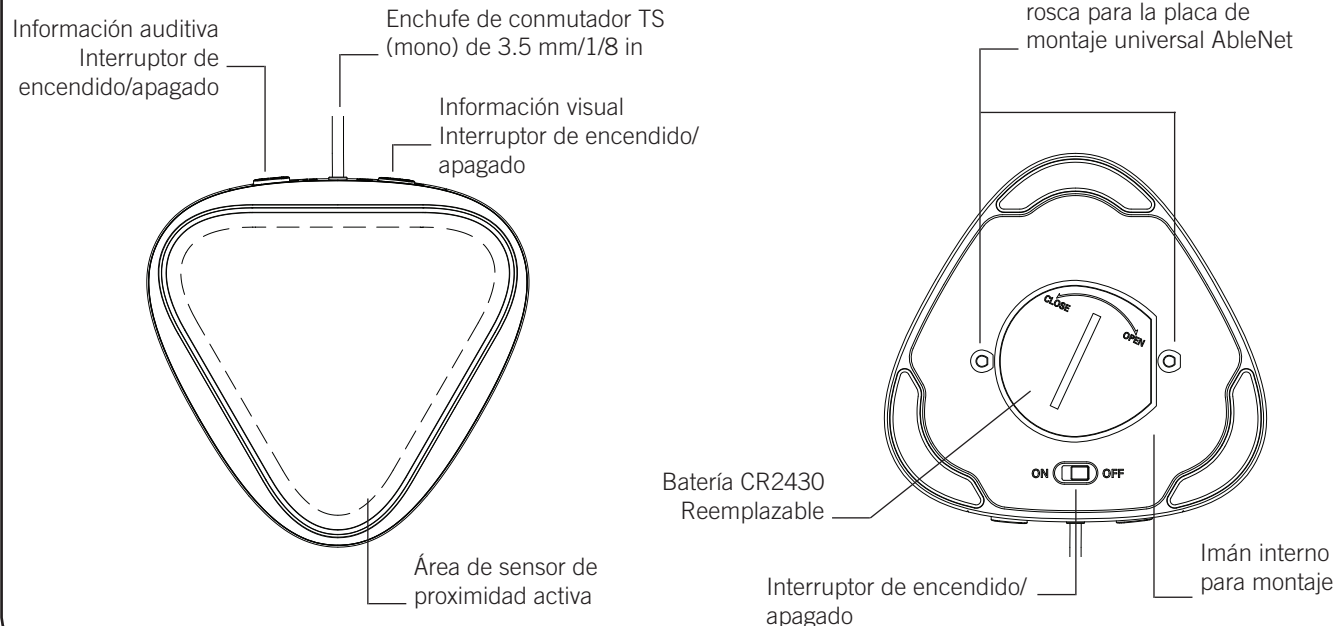

Introducción

1. Conecte el enchufe de conmutador BIG Candy Corn a un dispositivo con un conector TS (mono) de 3.5 mm/1/8 in.
2. Encienda el interruptor BIG Candy Corn.
3. El interruptor BIG Candy Corn se activará cuando el usuario esté a menos de 10 mm o toque el área de sensor de proximidad activa.

Opcional: El interruptor BIG Candy Corn ofrece al usuario información visual con tres luces LED e información auditiva con un pitido cuando se activa el interruptor. Ambas funciones pueden encenderse o apagarse.

Montaje del interruptor

El interruptor BIG Candy Corn es compatible con la placa de montaje universal AbleNet y los brazos de montaje AbleNet. Conecte la placa de montaje universal AbleNet al interruptor BIG Candy Corn a través de las dos conexiones de tornillo de rosca que se encuentran en la parte inferior del interruptor BIG Candy Corn.

El interruptor BIG Candy Corn también contiene un imán interno que le permite montarse rápidamente en una superficie magnética sin la placa de montaje universal AbleNet.

Garantía

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información de devolución o reparación, está disponible en www.ablenetinc.com.